



Quédese en el hogar que usted ama.

Elan es el salvaescaleras más popular de Bruno y puede ayudarle a tener acceso a todo su hogar. Elan está diseñado para escaleras interiores rectas y le brinda una combinación de funcionalidad de alta calidad, confiabilidad insuperable y un diseño fácil de usar.

Bruno le ofrece la confiabilidad de un producto hecho en Estados Unidos de América y le ayuda a que se quede en su hogar con comodidad y facilidad.

Para más información sobre Elan, el salvaescaleras más vendido de Bruno, visite www.bruno.com.

Hasta una leyenda puede necesitar ayuda para subir más



“Hicimos una sala de deportes en nuestro hogar para disfrutar de la temporada de fútbol americano con nuestra familia justo antes de que Bart sufriera sus ataques. Después, Bart no podía utilizar esa sala porque no podía usar las escaleras. Gracias al salvaescaleras Bruno, podemos disfrutar de toda nuestra casa otra vez.”

Bart y Cherry Starr

“Mariscal de campo del Salón de la Fama de los Green Bay Packers”



Compacto, con diseño plegable para dejar mucho espacio libre en las escaleras.



Dos dispositivos inalámbricos para traer/enviar la unidad a control remoto.



www.bruno.com



Sensores que garantizan la seguridad



Elegante y limpio



Asiento giratorio que sale para que usted se siente y se pare fácilmente.


CARACTERÍSTICAS DEL ELAN

- Capacidad de peso: 300 lb (136 kg)
- Asiento acolchado y amplio con ajuste para varios niveles de altura
- Interruptor basculante en el apoyabrazos que se usa fácilmente
- Riel anodizado con cremallera de engranaje cubierta que le da una apariencia elegante
- Diseño de riel vertical que permite una instalación compacta a 5 pulg. (127 mm) de la pared o menos
- Asiento, apoyabrazos y reposapiés plegables que dejan mucho espacio extra para los escalones
- Tiras de carga continua a lo largo del riel para movilizar la unidad en donde se detenga
- Dos dispositivos inalámbricos para traer/enviar la unidad a control remoto.
- Dos pilas de 12 V que garantizan un funcionamiento confiable, incluso cuando falte la electricidad
- Arranques y paradas suaves para llevarle cómodamente de principio a fin
- Sensores de obstrucciones y cinturón de seguridad que garantizan su seguridad
- Diagnóstico auditivos para dar fácilmente servicio a la unidad
- Garantía de Oro: cinco años para los componentes principales; dos años para las piezas

Asiento acolchado y amplio



OPCIONES DEL ELAN

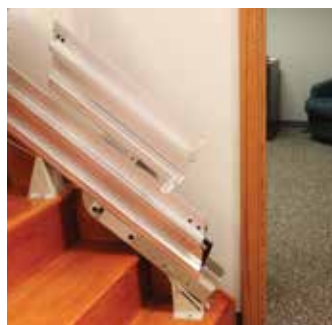

Riel con repliegue eléctrico o manual para abrir paso en pasillos estrechos o puertas que están en la parte inferior de las escaleras. Operación manual o automática con botones.



Asiento giratorio eléctrico para pararse sin esfuerzo. Control del interruptor en el apoyabrazos o con dispositivos inalámbricos para traer/enviar la unidad.



Reposapiés plegable eléctrico que se despliega/repliega automáticamente cuando el asiento se despliega/repliega. Control del apoyabrazos opcional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del asiento: 17,5 pulg. de ancho x 15 pulg. de largo (445 mm de ancho x 381 mm de largo)

Anchura entre los brazos: 20 pulg. (508 mm)

Tamaño del reposapiés estándar:

10.5 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho (267 mm de largo x 279 mm de ancho)

Riel vertical: se instala dentro de 5 pulg. (127 mm) de la pared

Acerca de Bruno

Bruno Independent Living Aids ha ayudado a mejorar la vida de personas con movilidad limitada durante más de 30 años. Los salvaescaleras y dispositivos de elevación de plataforma vertical de Bruno son diseñados y fabricados en Estados Unidos de América para mejorar el acceso a los hogares, negocios y edificios públicos, y la línea completa de Bruno de elevadores de sillas/scooters ayudan a que las personas transporten fácilmente sus dispositivos de movilidad. Asimismo, Valet Signature Seating de Bruno es el líder mundial en los revolucionarios asientos giratorios de automóviles que ayudan a que las personas puedan entrar y salir de sus vehículos con más facilidad. Bruno es una empresa familiar que se enorgullece por enfocarse firmemente en la calidad y la seguridad y por ser líder de la innovación en la industria.

Hecho orgullosamente en Estados Unidos de América



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066

www.bruno.com